

Your source of consistent quality and care



 **Elcam Accessories**

 **Elcam  
MEDICAL**  
Where everything connects

# Elcam Accessories

Elcam Accessories™ はElcam Medicalのブランドの一つで、点滴療法や麻酔、透析用血液ラインなど、日常的に必要とされる医療用流体制御機器の総称になります。Elcam Accessoriesは、包括的な製品ポートフォリオを提供し、ディスプレイ医療機器やコンポーネントの分野において、お客様のあらゆるニーズにお応えします。

Elcam Accessoriesは、臨床、開発、製造、品質、薬事、ロジスティクスまで、エンド・ツー・エンドのカスタマー・エクスペリエンスをサポートしています。このサポートにより、私たちのコンポーネントをお客様の製品にシームレスに統合することができ、あなたの医療製品に「更なる安心」を付加価値として提供することが可能になります。

医療機器市場で20年以上の経験を持つElcam Accessories™は、主に2つの臨床専門分野に焦点を当て、顧客ニーズに基づいた柔軟なソリューションを提供しています。:



## 点滴療法と麻酔

注射部位、点滴フィルター、クランプなど、当社の点滴療法・麻酔用アクセサリは、あなたの点滴セットに最適な製品です。



## 人工透析

Elcam Accessories透析用コンポーネントは、幅広い製品ラインナップを取り揃えており、カスタマイズ、標準を問わず、あなたの輸液ライン製品にソリューションを提供します。



Elcam Accessories™製品ラインの大部分は、Elcam Medical Italy SPAの2つの生産工場で製造されています。施設はイタリア北部のカルピとミランドラにあり、約4,000m<sup>2</sup>のISOクラス8 (EN ISO 14644-1準拠) のクリーンルームにて、最先端の技術に準拠して設計・開発されており、質的にも量的にもお客様の要求を満たす環境を整えています。

Elcam Medical Italy SPAは1993年、ヨーロッパのディスポーザブル医療製品製造の中心地として有名なイタリア カルピに設立されました。20年以上の経験を持つElcam Medical Italyは、OEM医療機器業界向けの射出成形と部品の組み立てを行っています。

---

Elcam Accessories™ における、12の製品カテゴリーは、医療用流体制御機器の日常的なニーズに応えるようデザインされており、幅広い製品を提供しています。

当社の製品は、お客様のニーズや仕様に応じてカスタマイズすることができます。コンポーネントはDOPやDEHPを使用せず、EtO滅菌やガンマ線滅菌に有効な様々な材料で供給することができ、色、チューブサイズも豊富に取り揃えています。

Elcam Accessoriesはグローバル市場向けに展開されており、業界最高水準の設計・製造を行っています。



## オスルアーロックコネクター

Elcam Medicalは、ISO 80369-7に準拠した、あらゆる医療用途に対応する様々なオスルアーコネクターを製造しています。

当社のオスルアーコネクターは、様々な要件を満たす幅広い形状にてご利用いただけます。:

- 直径サイズ: 1.95~9.54mm/0.077~0.376インチ
- ウイングあり/なし
- 回転、セルフエジェクション、セルフセンタリング、キャップ付き/なし
- カラーバージョン
- PVC、Mabs、PC、トライタン
- 硬膜外用特殊コネクター ISO 80369-6 TritanおよびMABS製

## Safe2 Rotator™ オスルアーコネクター

信頼できるコネクション


- チューブ径 4.1mmおよび6.8mm用
- 機械的負荷とそれに伴う亀裂や漏れの最小化
- 強固なロック
- 360° 回転する柔軟性
- アンチキンキング
- 不慮の切断の回避
- セルフセンタリング/セルフイジェクティング
- カラーバージョン

## メスルアーロックコネクター

Elcamは、ISO 80369-7に準拠した医療業界の要件を満たすメスルアーロックコネクターを提供しています。

当社のメスルアーコネクターは、幅広い形状にてご利用いただけます。:

- 直径サイズ: 2~6.8mm/0.079~0.268インチ
- ウイングあり/なし
- カラーバージョン

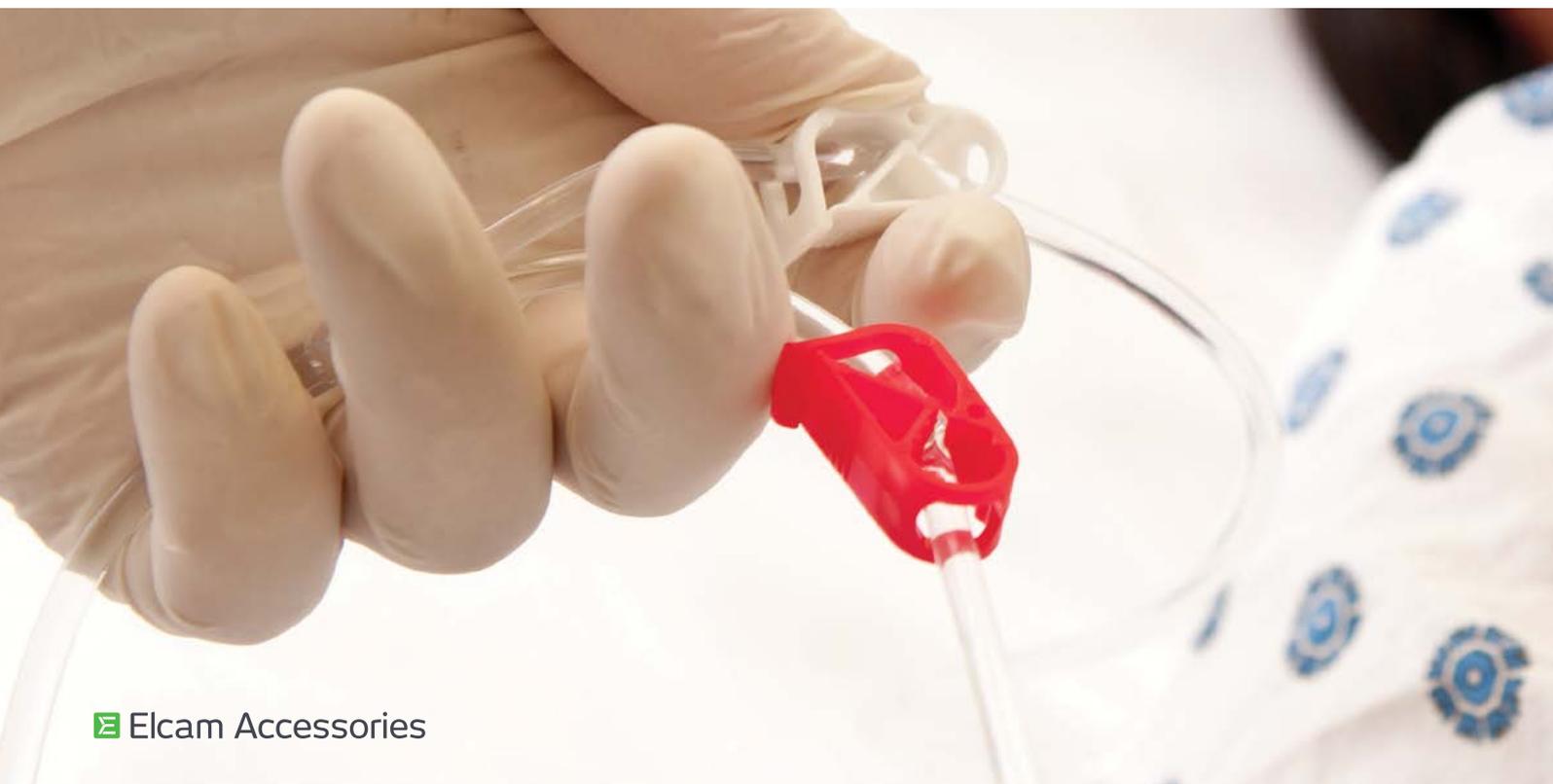



## コネクター

Elcam Medicalは、ラインのカスタマイズを可能にする、豊富な種類のコネクターをご用意しています。

特定のアプリケーション要件に対応するための構成と機能は以下になります。:


- エルボー
- ストレート
- W、Y
- T
- ハンセンとポンプのコネクター
- ユニバーサル、マルチウェイ
- 栄養

## バッグコネクター

様々な用途に迅速かつ確実にバッグを装着できるように、様々なバッグコネクターをご用意しています。:

輸液、栄養、採血、廃棄物

ユニバーサル、経腸栄養、メンブレンコネクターに、スナップオフや破損オプションも含まれます。

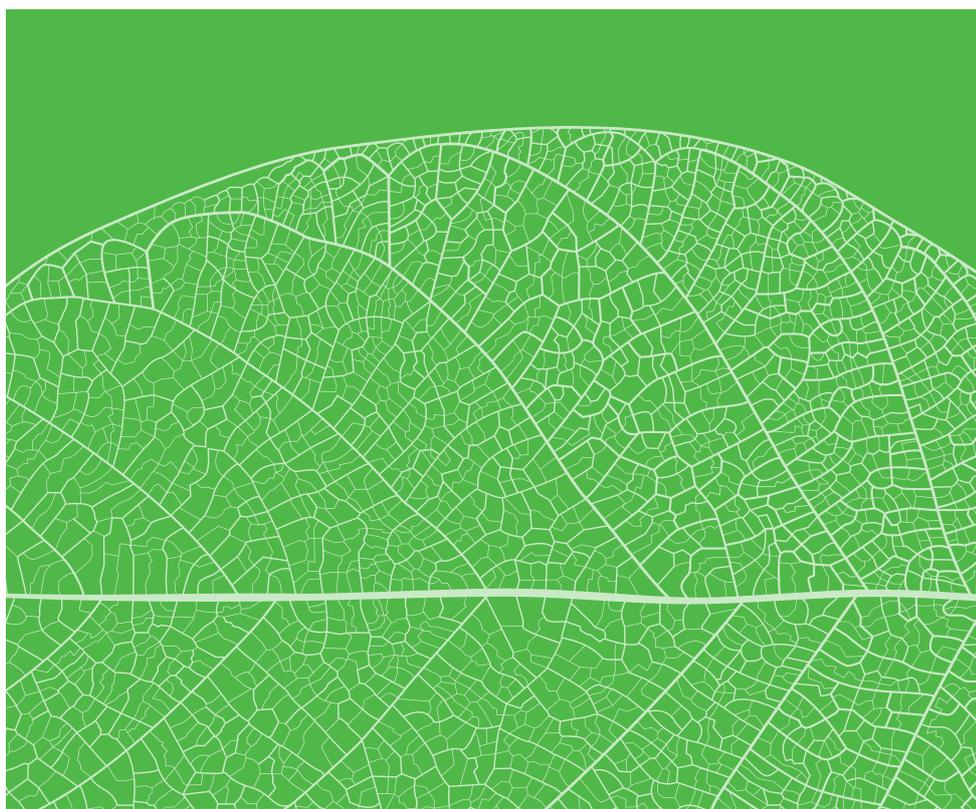



## ドリップチャンバーの構成部品

輸液・泌尿器用ドリップチャンバーには、ウォールアダプター、フィルター、チューブポケット付きリッド、オス型ルアーロック付きリッド、エアフィルターなど、豊富なアクセサリが揃っています。

Elcamのドリップチャンバーとドリップチャンバーカバーは、小児用から成人用まで、輸液や輸液のニーズに合わせて様々なサイズやチューブポートをご用意しています。:

## スパイク

Elcamの1wayスパイクと2wayスパイクは、ISO 8536-4と1135-4に準拠し、クラシックな直径4.1mmのIVアプリケーション、および/またはISO 80369-7に準拠したFLL継手用に設計されています。

当社のスパイクは、チャンバー組立用フランジ付き、薬剤移送用ダブルスパイク、化学療法アプリケーション対応、バクテリアエアフィルター3ミクロンまたは疎水性0.2ミクロン付き、スパイクカバー付きがあります。



## 注射部位

Elcamのインジェクションポートは、気密性と機能性を高める高度に自動化された工程で組み立てられています。

プラグは、数回の注入だけでなく、ストレート、Y、T、折れにくい再使用可能なもの、透析血液ラインのサンプリングポートなど、様々な形状に取り付けテストされています。

注射部位はラテックスフリーです。

## キャップ、カバー、ロックリング

当社のキャップ、カバー、ロックリングは、メスおよびオスキャップ、ベントおよびクローズド、さまざまなコンポーネントに適合するテザーなど、さまざまなオプションが用意されています。

Elcamのカバーとキャップは、シンプルな商品と思われがちですが、当社の最も洗練された製品であると共に、最高水準のもと、細心の注意を払って製造されています。

この製品は、基本的な滅菌要件に適した様々な素材と様々な色で供給が可能です。



---

## フィルター

様々な用途に使用可能なElcamのフィルターは、メッシュ全体で空気や液体をろ過します。:

- ポアサイズ (フィルター孔径の平均寸法)
- メッシュオープン (全表面に占めるオープン面の割合)

私たちは、親水性フィルターと疎水性フィルターを製造しています。

---

## プレッシャーピロー

一般的に透析用途に使用されるソフトリザーバーで、流体回路内の圧力上昇を抑えることが可能。

Elcamのプレッシャーピローは、標準バージョンと、サービスラインポート付きと逆流防止バルブ付きがあります。



---

## クランプ

Elcamのクランプは、ライン内の流れを制御・調整するよう設計されており、人間工学に基づいて作られた幅広い形状の製品は、多くの医療機器に適合することができます。

当社のクランプは、スライドクランプ、ピンチクランプ、非再開クランプ、ホイール付きローラークランプ、またはチューブ固定用のクリップがあります。カラーバリエーションも豊富です。

---

**Head Office / Manufacturer  
Elcam Medical**

BarAm 1386000,  
Israel  
Tel: 972 4 698 8120/1  
Fax: 972 4 698 0777  
sales@elcam.co.il

**USA  
Elcam Medical Inc.**

1 University Plaza, Ste. 511  
Hackensack, NJ 07601  
Tel: +1 201 4571120  
Fax: +1 201 4571125  
info@elcam-medical.com

**Europe  
Elcam Medical Europe**

Via Emilia Romagna 15,  
41012 Carpi (Modena) Italy  
Tel: +39 059 697710  
Fax: +39 059 697705  
sales.eu@elcam-medical.com

**China  
Elcam China Office**

Room 3309, Jinhai Mansion  
No. 89 of Anshun Road,  
Shanghai, PRC. Zip: 200051  
Tel: +86 21 62829967  
Fax: +86 21 62829967  
johnliu02@126.com



 Elcam Devices     Elcam Stopcocks     Elcam Accessories