



インターベンショナル・カーデ
ィオロジー & ラジオロジー



 Elcam Devices


 Elcam Stopcocks

 Elcam Accessories

インターベンショナル・カーディオロジー & ラジオロジー

インターベンショナル・カーディオロジーとラジオロジー市場で認知度を高めることは、決して容易なことではありません。

様々なインターベンション専門家の協力のもと、私たちがインターベンション製品を開発した際にまさに念頭にあったのがこの目標です。Elcamのインターベンショナルアクセサリは、特に「使いやすさ」に重点を置いています。この使いやすさにより、市場での認知度を向上することができると共に、私たちElcamの高いサービス品質、そして柔軟性はこれら競争力を持つデバイスをあなたの製品やポートフォリオにシームレスに統合することを可能にします。

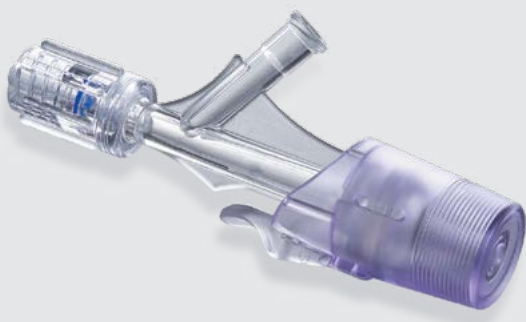

Y-Click

PTCAアプリケーション用Yコネクタ

カテ室において、出血を抑えることは非常に重要です。

ElcamのY-Clickコネクタは、診断およびインターベンション処置の両方に使いやすい止血デバイスです。人間工学に基づいて設計されたこのデバイスは、インターベンション手技中の出血を大幅に減少させます。Y-Clickは、自動閉鎖構造と片手での操作を可能とし、医師のパフォーマンスをさらに向上させます。

DPT

ディスポーザブル圧力トランスデューサー

インターベンション手技中の圧力感知には、キャリブレーションやフラッシングは必要なく、シンプルな圧力モニタリングが適しています。

ElcamのDPTは、まさにこのタスクに最適な製品です。信頼性が高く、使いやすいストレート構造のトランスデューサーであり、Elcamの品質とサービスを備えています。



Elcamのインターベンション用特別設計ストップコックとマニホールド

インターベンショナルカーディオロジーとラジオロジーには、ユニークな特徴を持つ流量制御装置が必要です。OEMストップコックの世界的リーダーとして、Elcamはインターベンショナルアプリケーションのニーズに合わせて特別に設計したオーダーメイドのストップコックとマニホールドを提供しています。

高圧ストップコック

耐圧 1200 psi

Elcam Medicalの高圧ストップコックは、カテ室内のアプリケーションに適しており、スムーズで使いやすい操作で1200psiの圧力に耐えるように設計されています。当社の高圧ストップコックは、回転式高圧アダプターまたは標準スイベル・ルアーロックナットを備えた1、3および4way構成になります。



中圧ストップコック

耐圧 500 psi

Elcam Medicalの中圧ストップコックは、500psiの耐圧性を備えており、インターベンショナル製品の圧力要件に対してコスト効率の高いソリューションになります。



高圧マニホールド

耐圧 750 psi

Elcamの高圧マニホールドは、750psiの圧力に耐えるよう設計されており、使いやすさと利便性向上に向け、人間工学に基づき独自に設計されたハンドルを備えています。2つまたは3つのユニット構成でご利用いただけます。



高圧ローテーター

Elcam Medicalの高圧ローテーターは、カテ室やその他のインターベンション用途に適しており、最大1200 PSIの圧力に耐えるように設計されています。

ElcamのHPローテーターはオス型ルアーロックローテーターで、医師がストップコック後方のチューブを捻ることなくカテーテルを自由に回転させることができます。当社のハイプレッシャーローテーターは、ルアー、チューブフィット、チューブアセンブリーからお選びいただけます。



Head Office / Manufacturer
Elcam Medical

BarAm 1386000,
Israel
Tel: 972 4 698 8120/1
Fax: 972 4 698 0777
sales@elcam.co.il

USA
Elcam Medical Inc.

1 University Plaza, Ste. 511
Hackensack, NJ 07601
Tel: +1 201 4571120
Fax: +1 201 4571125
info@elcam-medical.com

Europe
Elcam Medical Europe

Via Emilia Romagna 15,
41012 Carpi (Modena) Italy
Tel: +39 059 697710
Fax: +39 059 697705
sales.eu@elcam-medical.com

China
Elcam China Office

Room 3309, Jinhai Mansion
No. 89 of Anshun Road,
Shanghai, PRC. Zip: 200051
Tel: +86 21 62829967
Fax: +86 21 62829967
johnliu02@126.com



 **Elcam Devices**

 **Elcam Stopcocks**

 **Elcam Accessories**