

Safe2 Rotator™ Luer Connector


安心安全の接続

簡単装着 - しっかりロック - 360° 回転自在 - 簡単取り外し

医療用チューブの良好で安全な接続は、安全で効果的な治療において極めて重要です。チューブの漏れや不安定な接続は、患者様に重大かつ不可逆的な損傷を負わせたり、場合によっては致命的となることもあります。

ストップコックに関しては、確実に接続されていることに加え、使い勝手がよく、本来の機能として、液体を運び、アドミニストレーションセットへのアクセスを提供するものでなりません。

これを念頭に置いて、Elcam Medicalは新しいSafe2 Rotator™を設計しました。

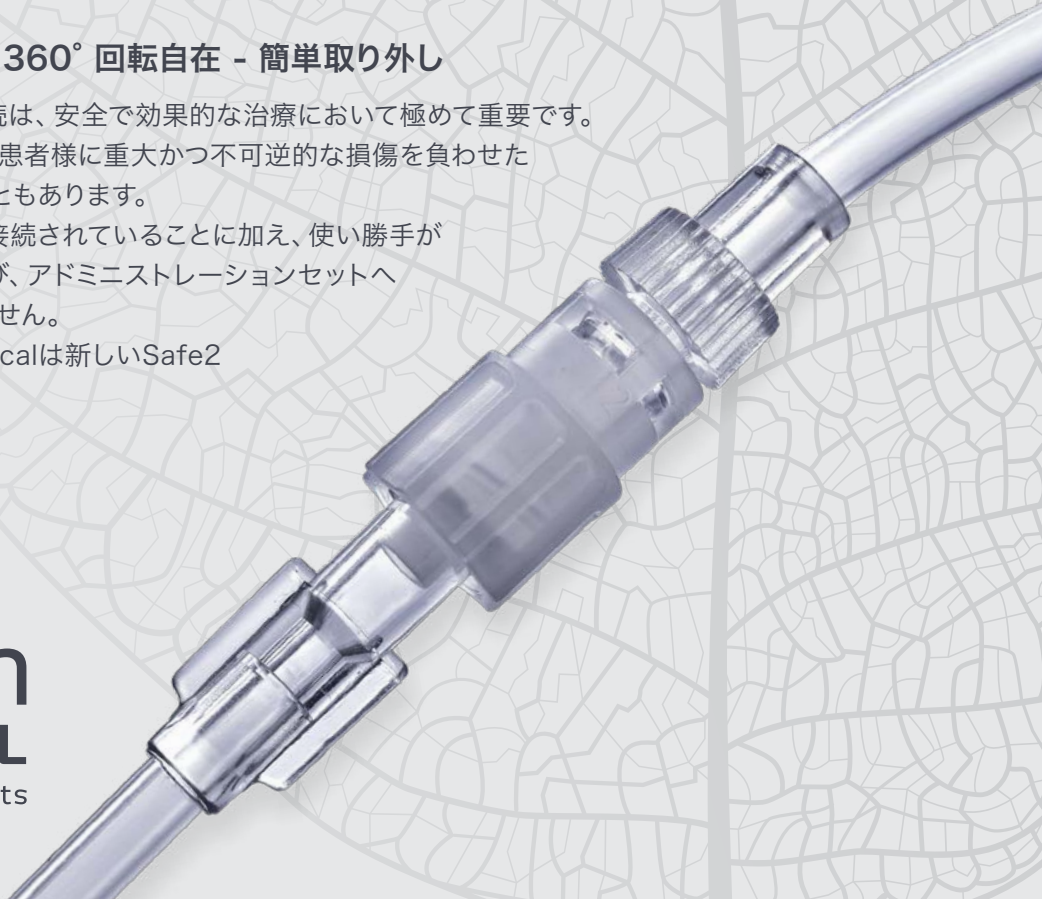

確実な接続



 Elcam Devices


 Elcam Stopcocks

 Elcam Accessories

Safe2 Rotator™ Luer Connector

安心安全の接続

Safe2 Rotator™ の柔軟な素材（ポリエチレン）と回転ロック機能は、従来の使いやすさと一般的な使用方法を変更せずに、最も重要な流体管理アプリケーションに使いやすさと更なる安全性を提供します。:

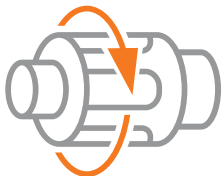


機械的利点

- 長時間の接続時に発生するメカニカルストレスを低減し、亀裂の形成とそれに伴う漏れを最小限に抑えます。
- 締め過ぎによる漏れを防止。
- 癒着によるルアーロックの“詰まり”を防止し、治療終了時の容易な切り離しを可能に。
- 不慮の切断を防止。



安全上の利点

- 薬剤や血液の漏出および関連する有害事象を最小限に抑える
血液媒介病原体への曝露
血液損失と脱水
空気塞栓症
微生物の侵入
CRBSI
- 治療の完全性を最大化

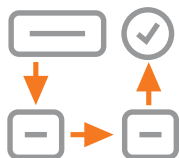

ワークフローにおける利点

- チューブ・セットの折り曲がりやねじれを軽減
- 輸液中の注入ポートやサンプリングポートへのアクセスが容易に
- カップリングされたルアーロック接続とストップコックの回転が可能

コネクタの利用可能な構成（スタンドアロン・バージョン）：

チューブ外径 (mm)	ボディ素材	ナット材質	ナットの色
6.8	PC	PE	○ ● ● ● ●
4.1	PC	PE	○ ● ● ● ● ●



特にニードルレスコネクタと組み合わせると、セットの遠位部を回転させることができる。



Elcam Medical's Safe2 Rotator™ – 治療全体にわたる安全な接続

Safe2 Rotator™ ルアーコネクタは、スタンドアローン型とストップコック型があります。ストップコック型は、非滅菌製品用としてCE承認され、510(k)をクリアしています。

お問い合わせはこちら >>



www.elcam-medical.com

Head Office/Manufacturer Elcam Medical

BarAm 1386000,
Israel
Tel: 972 4 698 8120
Fax: 972 4 698 0777
sales@elcam.co.il

USA Elcam Medical Inc.

1 University Plaza, Ste. 511
Hackensack, NJ 07601
Tel: +1 201 4571120
Fax: +1 201 4571125
info@elcam-medical.com

Europe Elcam Medical Europe

Via Emilia Romagna 15,
41012 Carpi (Modena) Italy
Tel: +39 059 697710
Fax: +39 059 697705
sales.eu@elcam-medical.com

China Elcam China Office

Room 3309, Jinhai Mansion
No. 89 of Anshun Road,
Shanghai, PRC. Zip: 200051
Tel: +86 21 62829967
Fax: +86 21 62829967
johnliu02@126.com